

SOLID PLUS HEAT

WWW.ROTAID.COM



CARDIAID

Van der Burchstraat 40
2132 RN HOOFDDORP
☎ 00800-22734243
✉ info@cardiaid.nl
🌐 www.cardiaid.nl

CardiAid[®]
Automatische Externe Defibrillator



ROTAID[™]
AED CABINETS

ROTAID SOLID PLUS HEAT

PRODUCT SHEET

De Rotaid Solid Plus Heat is een innovatieve wandkast voor een herkenbare en robuuste behuizing van uw AED. De karakteristieke ronde vorm en groene kleur maken uw AED snel en eenvoudig vindbaar en zorgen voor een hoogwaardige uitstraling. Het grote AED logo, alsmede het kijkvenster, laten geen ruimte voor interpretatie. Deze robuuste wandkast bevat levensreddende apparatuur.

Met een intuïtieve draaibeweging is de Solid Plus Heat snel en eenvoudig te openen. Doordat de gehele kap wordt verwijderd, heeft u volledige toegang tot de AED, die via de ophangbeugels snel te grijpen is. De kap blijft door middel van een lederen band aan de achterwand hangen. Via een roestvrijstalen haak aan de onderzijde van de Solid Plus Heat kunt u eenvoudig een zegel, tag, slot of ander item bevestigen.

De ronde kap, voorzien van uitsparingen voor een ferme grip, is vervaardigd uit 100% krasbestendig Polycarbonaat, in een dikte van 5 millimeter. Dit zorgt voor een robuuste, stof- en waterdichte behuizing van uw AED. De kap is voorzien van UV filters waarmee een adequate bescherming tegen direct en indirect zonlicht plaatsvindt. Uiterlijk verval, roest en ophoping van residu zijn uitgesloten.



Via een op maat gemaakt verwarmingselement wordt de temperatuur volautomatisch op tenminste 5 Graden Celsius gehouden, ook als de buitentemperatuur daalt tot -25 Graden Celsius. Door gebruik te maken van een intelligent verwarmingssysteem gebruikt de verwarming enkel de hoeveelheid stroom die benodigd is. Het element is daarmee bijzonder efficiënt en energiezuinig. Het element dient enkel te worden voorzien van een stekker en behoeft geen externe voeding / transformator.

De materialen zijn beproefd in de buitenlucht en zorgen voor een langdurige bescherming van de AED.




**ZEER LAAG
ENERGIE
VERBRUIK**

**AUTOMATISCHE
WERKING**

**BRUIKBAAR TOT
-25°C**

ROTAID SOLID PLUS HEAT

TECHNISCHE DETAILS

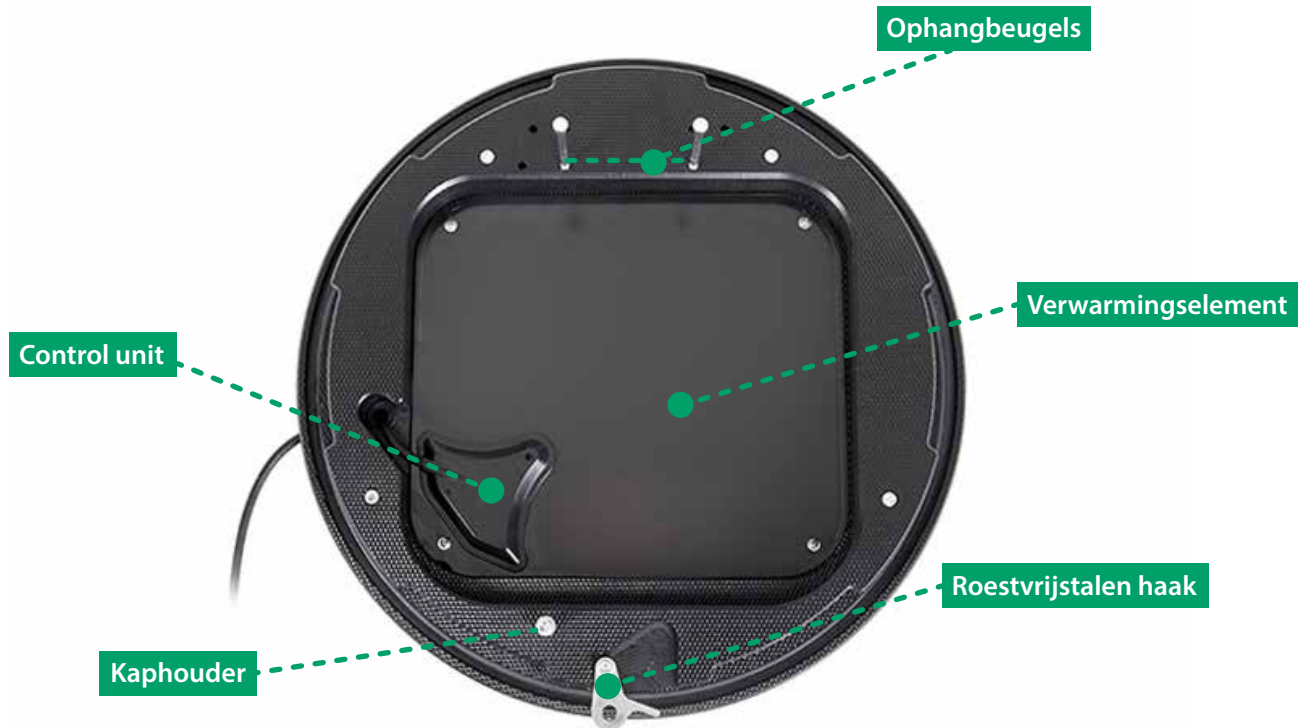

De achterwand is vervaardigd uit 100% HDPE en biedt plaats en bescherming aan vrijwel ieder merk en type AED op de markt.

CardiAid



Individueel verpakt, bevestigingsmaterialen worden meegeleverd.