

SOLID PLUS



ROTAID SOLID PLUS

PRODUKTBLATT

Der Rotaïd Solid Plus ist ein innovatives Gehäuse für ihr AED-Gerät. Die charakteristische und auffällige runde Basisform, sowie die grüne Farbe machen das Gerät schnell und leicht zu erkennen und verleihen ihm eine hochwertige Ausstrahlung. Das auffällige AED-Logo und das Schauglas machen sofort deutlich: dieses Gerät rettet Menschenleben!

Mit einer intuitiven Drehbewegung wird der Rotaïd Solid Plus geöffnet. Der Gehäuse-Deckel wird mit dieser Drehbewegung völlig vom Gehäuse gelöst und bleibt mit einem Lederriemen mit der Grundplatte verbunden. Jetzt kann man den AED ungehindert und schnell von seiner Halterung abheben und herausnehmen. An der Unterseite des Gehäuses befindet sich ein Haken aus Edelstahl, zur Befestigung von Tags, Siegeln, Vorhangschlössern usw.

Der runde und griffige Gehäuse-Deckel ist aus 5mm starkem 100-prozentig kratzfestem Polycarbonat hergestellt. Das ergibt ein robustes, sowie staub- und wasserdichtes Gehäuse für ihr AED-Gerät. Der Deckel ist mit UV-Filtern ausgeführt, um ihr AED-Gerät gegen direkter und indirekter Sonneneinstrahlung zu schützen. Verwitterung, Rost oder Verunreinigung sind ausgeschlossen.



DIE ROBUSTE KONSTRUKTION UND HOHE WASSERDICHTIGKEIT BIETEN MAXIMALEN SCHUTZ



NACHHALTIG, WEIL MIT MODERNSTER TECHNIK UND VERWENDUNG VON 100% RECYCELTEM KUNSTSTOFF HERGESTELLT




UNBEHINDERTER ZUGANG ZUM AED-GERÄT

LEDERRIEMEN FÜR GEHÄUSE-DECKEL

ROTAID SOLID PLUS

TECHNISCHE DATEN

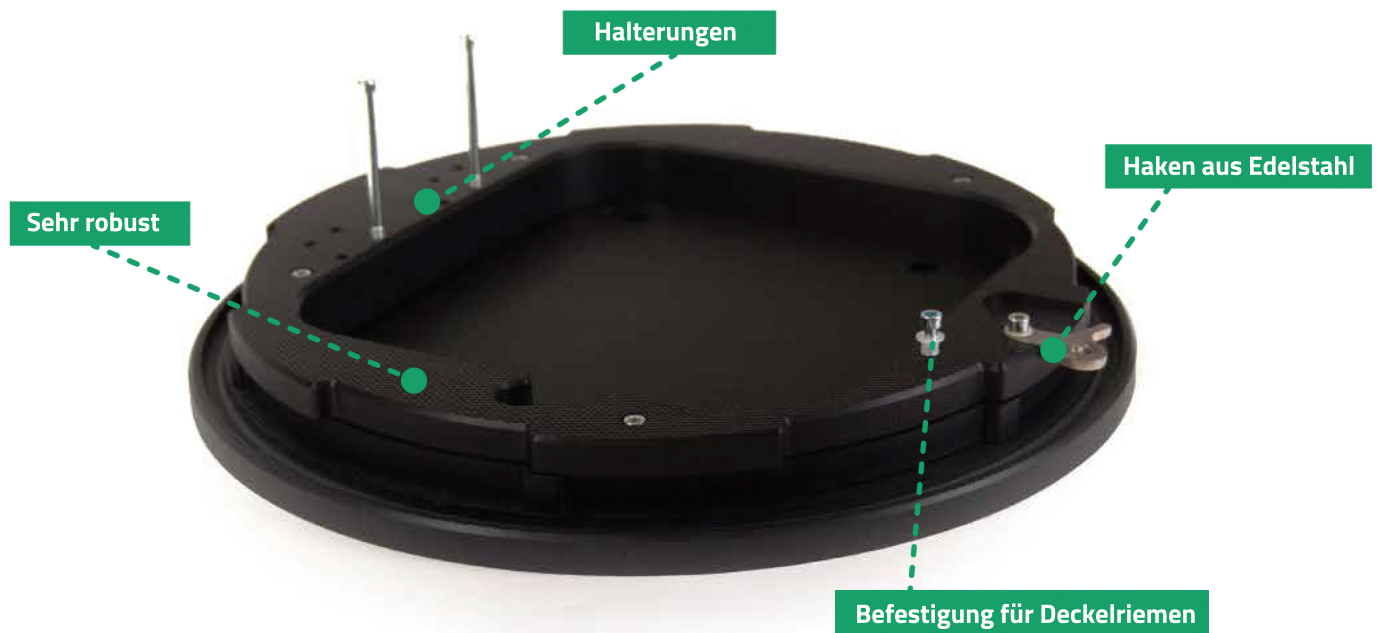

Die Grundplatte ist aus 100% HDPE hergestellt und bietet Platz für fast alle existierende AED-Typen. An der Frontseite ist ein Raum für den Anschluss einer 9-Volt Batterie vorgesehen. Gehäuse sind einzeln verpackt; Befestigungsmaterialien sind inklusive. **Dimensionen:** Länge 48 cm, Breite 48 cm, Tiefe 18 cm, Gewicht 6,7 kg

